

CEPILLOS PARA CANULADOS



Comercializador: DinMed S.A.S

Fabricante: Batrik

Registro Sanitario: No requiere 2020020645

Descripción genérica: Cepillo para canulados

Presentación: Unidad

Características:

Insumo que apoya un proceso crítico en el reprocesamiento de dispositivos médicos, teniendo en cuenta que de un buen proceso de limpieza depende el éxito de los procesos de desinfección y esterilización, diseñado específicamente para el lavado de instrumental quirúrgico, dispositivos médicos y equipos biomédicos.

- Cerdas de nylon de color transparente, de alta densidad y firmeza lo que permite generar procesos de limpieza más efectivos sin realizar microdaños.
- Fabricados en polipropileno estándar.
- Material termoplástico que es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones y posee una gran resistencia.
- Es un plástico cristalino que ofrece un excelente equilibrio de propiedades, que acortan la brecha entre metales y plásticos, se usa cuando se requiere mayor rigidez.
- Ensamblados con soldadura patentada que garantiza que NO se desensamblan durante su uso (no se usa soldadura mecánica, ni pegamento).
- Múltiples diámetros y longitudes disponibles diámetros.

Beneficios:

- Se adaptan a todas las necesidades de las centrales de esterilización.
- Insumo que mejora y simplifica procesos de lavado que permiten acceder a lúmenes, superficies ranuradas, superficies irregulares o puntos de difícil acceso de las piezas a procesar.

Uso:

Limpieza y lavado de instrumental quirúrgico, dispositivos médicos y equipos biomédicos canulados.

CEPILLOS PARA CANULADOS



Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 10-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Almacenarse protegido de exposición a la luz solar.

Condiciones de transporte: Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.

El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

¿Cómo elegir el cepillo canulado adecuado?

- Determinar la longitud total y el diámetro del lumen del dispositivo a limpiar, revise las especificaciones del fabricante del dispositivo para obtener las medidas exactas.
- Agregue al menos 5 cm a la longitud máxima del dispositivo a limpiar, para que tengas un margen adecuado de trabajo.



CEPILLOS PARA CANULADOS RIGIDOS



REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN
310541-35005-S-R0 Cepillo para canulados 5 mm blanco	Color: Blanco Longitud total: 35 cm Diámetro del cepillo: 5 mm Diámetro de la vaina: 3 mm	
310541-35010-S-R0 Cepillo para canulados 10 mm rojo	Color: Rojo Longitud total: 35 cm Diámetro del cepillo: 10 mm Diámetro de la vaina: 4 mm	
310541-35020-S-R0 Cepillo para canulados 20 mm azul	Color: Azul Longitud total: 35 cm Diámetro del cepillo: 20 mm Diámetro de la vaina: 5.8 mm	



CEPILLOS PARA CANULADOS RIGIDOS



REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN
3300126-06175 Cepillo cerdas ovaladas 44,5 mm x 152 mm	Color: Identificador azul claro en la punta Longitud total: 15.2 cm Tipo de cepillo: Ovalado Diámetro del cepillo: 44.5 mm Mango: Sin vaina	
3300126-08325 Cepillo cerdas ovaladas 82,6 mm x 203 mm	Color: Identificador azul oscuro en la punta Longitud total: 20.3 cm Tipo de cepillo: Ovalado Diámetro del cepillo: 82..6 mm Mango: Sin vaina	
3300122-12078-R0 Cepillo para canulados 305mm azul	Color: Identificador azul oscuro en la punta Longitud total: 30.5 cm Tipo de cepillo: Recto Diámetro del cepillo: 2 mm Mango: Sin vaina	
3300123-16591-R1 Cepillo para canulados 406mm azul	Color: Identificador azul oscuro en la punta Longitud total: 40.6 cm Tipo de cepillo: Recto Diámetro del cepillo: 15 mm Mango: Sin vaina	

CEPILLOS PARA CANULADOS FLEXIBLES

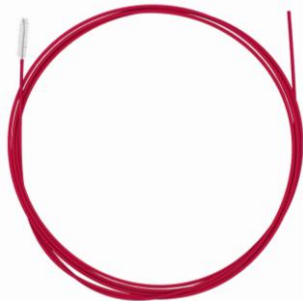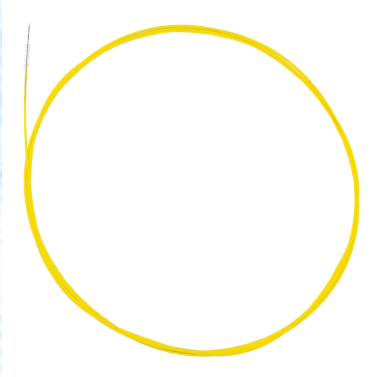

REFERENCIA Y DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN
33001311-23050-2 Cepillo para canulados 5mm rosado	Color: Rosado Longitud total: 230 cm Diámetro del cepillo: 5 mm Diámetro de la vaina: 1.85 mm Cepillo en ambos extremos	 A red flexible brush for catheters, shown in a circular shape. The brush is made of a flexible material and has a red handle.
3300135-23020 Cepillo cilindrico 2 mm x 230 cm	Color: Amarillo Longitud total: 230 cm Diámetro del cepillo: 2 mm Diámetro de la vaina: 1 mm Cepillo en un extremo	 A yellow flexible brush for catheters, shown in a circular shape. The brush is made of a flexible material and has a yellow handle.