# PRUEBA VERIFICACIÓN DE SELLADO

**Importador:** DinMed S.A.S
**Fabricante:** Steristar
**Registro Sanitario:** No requiere 2026025628
**Vida útil:** 5 años
**Material:** Celulosa, tinta.
**Presentación:** Paquete X 100
**Referencia:** 31001C-1001

## Características:

La prueba verificación de sellado es un producto diseñado para evaluar visualmente la calidad y uniformidad del sellado térmico realizado por las máquinas selladoras utilizadas en el proceso de preparación de empaques de grado médico y Tyvek.
Permite identificar posibles irregularidades en las áreas de sellado, como burbujas de aire, discontinuidades o zonas sin sellar, facilitando la detección oportuna de deficiencias en el funcionamiento de los equipos.
Su utilización contribuye al control y seguimiento de los parámetros de sellado, favoreciendo la identificación de desviaciones que puedan comprometer la calidad del cierre de los empaques.

## Indicación:

Diseñado para verificar visualmente la calidad del sellado térmico de bolsas de grado médico, mediante la identificación de irregularidades en la continuidad y uniformidad de la zona sellada.
Se utiliza como herramienta de control durante la evaluación del desempeño de las máquinas selladoras, permitiendo identificar posibles fallas en el proceso de sellado.



# PRUEBA VERIFICACIÓN DE SELLADO

## Modo de uso:

1. Marcar todos los campos de la prueba verificación de sellado, excepto los campos *"Cumple"* y *"No cumple"* que serán usados al final.

2. Introducir la prueba verificación de sellado en un empaque de papel grado médico o Tyvek (para evitar desperdicios de papel se recomienda que sea de 200 mm de ancho y 40 mm de largo, que cubra únicamente la franja de tinta de la prueba), asegurando que la cara de evaluación esté orientada hacia la película transparente de la bolsa.

3. Ajustar la temperatura de funcionamiento de la selladora de acuerdo con los parámetros establecidos para el proceso y el tipo de empaque.

4. Realizar el sellado de la bolsa con la prueba ubicada en su interior, sobre el fragmento de tinta negra.

5. Inspeccionar visualmente los resultados obtenidos en la zona de sellado:

- ✓ Si el resultado es satisfactorio y el sellado es uniforme, continuo sin interrupciones o burbujas visibles, se debe marcar el campo **"Cumple"** y almacenar el registro según los protocolos institucionales.



# PRUEBA VERIFICACIÓN DE SELLADO

## Modo de uso:


X Si el resultado no es satisfactorio y se identifican burbujas de aire, discontinuidades o áreas sin sellar, se debe marcar el campo *"No cumple"* y almacenar el registro según los protocolos institucionales. Se recomienda repetir la prueba, si el hallazgo persiste, contactar al servicio de mantenimiento de la máquina selladora para su revisión antes del uso normal en el proceso.




## Código QR:

La prueba verificación de sellado tiene un código QR, al leerlo se podrá identificar la información técnica (referencia, lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento).
Esto permite registrar la prueba en un software de trazabilidad incluido BAXEN

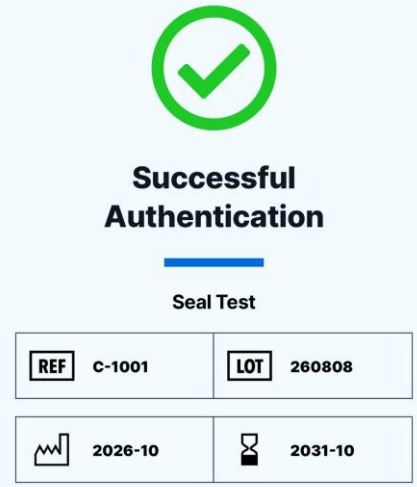

# PRUEBA VERIFICACIÓN DE SELLADO

## Propiedades:

| Característica | Especificación |
|---|---|
| **Nombre comercial** | Prueba verificaicón de sellado |
| **Referencia** | C-1001 |
| **Marca** | STERISTAR |
| **Dimensiones declaradas** | 20 cm × 65 cm |
| **Presentación** | 100 unidades por paquete |
| **Indicador químico** | No contiene |
| **Tipo de evaluación** | Inspección visual |
| **Cantidad de usos** | Producto de un solo uso |
| **Vida útil** | 5 años desde la fecha de fabricación |

## Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura en un rango de 4-30°C.
- Humedad relativa entre 30-70 %.

Este producto debe almacenarse alejado de agentes esterilizantes
Proteger de la exposición directa a la luz solar.

**Condiciones de transporte:** Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes.
El transporte de este producto no implica ningún riesgo alguno para la salud de las personas.

## Nota:

No utilizar el producto después de su fecha de vencimiento.
No reusar el producto por ningún motivo.